

# INSTRUCCIONES PARA TEST GENITAL Y CLAMIDIA

Muestra: Hisopado cervical femenino y/o un hisopo uretral masculino

## • Para recoger Muestras de Hisopado Cervical Femenina:

**1** Retirar el exceso de moco de la zona endocervical con una bola de algodón y desecharla. Utilizar el hisopo y el cepillo citológico suministrado en el kit.



**2** Con la ayuda de un espejo vaginal, insertar el hisopo en el canal endocervical, pasando por la unión escamocolumnar hasta que la mayoría de la punta ya no sea visible. Esto permitirá la adquisición de células epiteliales columnares o cuboidales, que son el reservorio principal del organismo Chlamydia. Y posteriormente realizar la misma técnica utilizando el cepillo citológico para la recolección de muestra para el test genital.



**3** Girar firmemente el hisopo 360° en una dirección (en sentido horario o antihorario), dejar reposar durante 15 segundos, luego retirar el hisopo. Realizar el mismo procedimiento con el cepillo citológico. Evitar la contaminación de las células exocervicales o vaginales



**4** Colocar el hisopo en el frasco con el diluyente del kit y si no se realiza inmediatamente la prueba de Chlamydia colocar el hisopo en un frasco estéril y seco, almacenarse de 4-6 horas a temperatura ambiente (15-30°C). En caso del test genital se coloca el cepillo citológico en la solución fisiológica inmediatamente. No refrigerar la muestra para el test genital.




## • Para recoger muestras de Hisopado Uretral Masculina:

**1** Utilizar hisopos estériles estándar de plástico o de alambre para la recolección de muestras uretrales. Instruir a los pacientes a no orinar durante al menos 1 hora a la recolección de muestras.



**2** Insertar el hisopo en la uretra alrededor de 2-4cm, gire el hisopo 360° en una dirección (en sentido horario o antihorario), dejar reposar durante 10 segundos, luego retirar. Con un hisopo más fino realizar una segunda toma para el test genital.

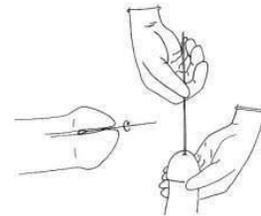

**3** Colocar el hisopo en el frasco con el diluyente del kit y si no se realiza inmediatamente la prueba de Chlamydia colocar el hisopo en un frasco estéril y seco, almacenarse de 4-6 horas a temperatura ambiente (15-30°C). En caso del test genital se coloca el cepillo citológico en la solución fisiológica inmediatamente. No refrigerar la muestra para el test genital.

